



Vascular[®]
therapies for living

capturer

Катетер
аспирационный

THE CORONARY SOLUTION

Превосходная экстракция

Внутренний просвет катетера разработан специально для сведения к минимуму трения и гарантирования оптимальной экстракции тромба.

ПРОТАЛКИВАЕМОСТЬ

ПРОХОДИМОСТЬ

ЭКСТРАКЦИЯ

Характеристики экстракции

Область экстракции (мм²):

Export (Medtronic)	Pronto V3 (Vascular Solutions)	Eliminate (Terumo)	Capturer (iVascular)
0,81	0,93	0,95	1,04

Тест выполнен iVascular. Данные находятся в отчете iVascular.

От маленьких до очень
больших тромботических
образований

- Покрытие ПТФЭ всей внутренней поверхности катетера обеспечивает быстрое удаление тромба через экстракционный просвет.
- Форма кончика гарантирует аспирацию во всех ситуациях.



Точная доставляемость

Проталкиваемость


Внутренняя оплетка выполнена из плоской проволоки, что исключает излом при сгибе и позволяет справиться с работой даже при извилистой анатомии и увеличивает проталкиваемость.

	Export (Medtronic)	Pronto V3 (Vascular Solutions)	Eliminate (Terumo)	Capturer (iVascular)
Проталкиваемость (МН)	3500	3000	3500	4100 <i>на 33% больше проталкивание</i>
Радиус перегиба (мм)	15,54	18,83	14,82	8,30 <i>на 57% меньше радиус перегиба</i>

Тест выполнен iVascular. Данные находятся в отчете iVascular.

В комплекте имеется стилет, используемый опционально для исключения излома во время продвижения катетера.

Гибкость

- Гидрофильное покрытие на внешней поверхности.
 **HYDRAH PLUS:** Запатентованное гидрофильное покрытие, специально разработанное для аспирационных катетеров. Гарантированная стабильная работа и контроль в течение всей процедуры.
- Совместимость с катетером: 6F



Еще более безопасная процедура

Полимерные рентгеноконтрастные маркеры обеспечивают точное позиционирование в любых ситуациях.



Общие характеристики

- Длина катетера быстрой замены 17,5 см
- Рабочая длина 140 см
- Совместимость с катетером 6F
- Совместимость с проводником 0,014"

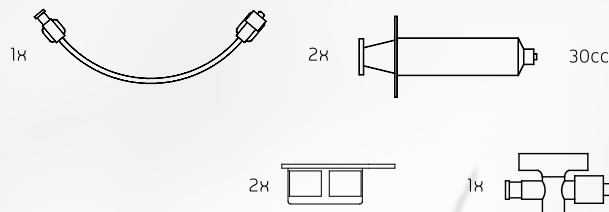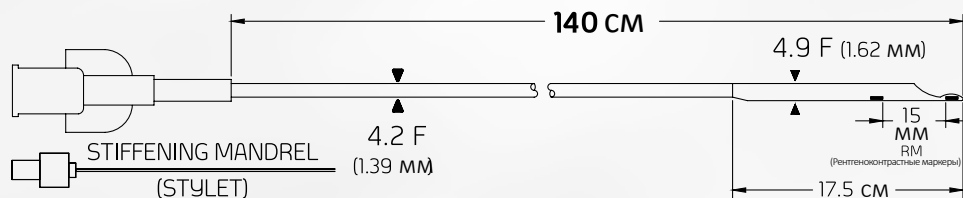

CE Mark сертифицированный продукт

Значения

DET R14 145 601

Vascular[®]
therapies for living

Эксклюзивный Дистрибьютор

ООО «РАЙМЕД ТГ ПВТ»

141001, Московская область,
Мытищинский район,
г. Мытищи,
ул. 1-я Вокзальная, д.8
(495) 956-83-16
www.raymed.ru

 **Raymed Trading Group**

Производитель:
LVD Biotech, S.L.

Cami de Can Ubach, 11
08620 Sant Vicenç dels Horts
Barcelona - Spain
Тел.: +34 936 724 711

www.ivascular.es
info@ivascular.es