

Информация для заказа Figulla® Flex II

Окклюдер Figulla® Flex II PFO (Один левопредсердный диск)

Номер по каталогу	Наименование продукта	Диск Ø (мм)	Размер дефекта (мм)
18PFO25S	Figulla® Flex II PFO	23/25	8<D≤13

Окклюдер Figulla® Flex II PFO (для ООО)

Номер по каталогу	Наименование продукта	Диск Ø (мм)	Размер дефекта (мм)
19PFO18D	Figulla® Flex II PFO	16/18	D≤8
19PFO25D	Figulla® Flex II PFO	23/25	8<D≤13
19PFO30D	Figulla® Flex II PFO	27/30	13<D≤15
19PFO35D	Figulla® Flex II PFO	31/35	D≥15

Окклюдер Figulla® Flex II ASD (для ДМПП)

Номер по каталогу	Наименование продукта	Диск Ø (мм)	Размер дефекта (мм)
29ASD04*	Figulla® Flex II ASD	Size 4	D≤4
29ASD05*	Figulla® Flex II ASD	Size 5	4<D≤5
29ASD06	Figulla® Flex II ASD	Size 6	5<D≤6
29ASD07	Figulla® Flex II ASD	Size 7.5	6<D≤7.5
29ASD09	Figulla® Flex II ASD	Size 9	7.5<D≤9
29ASD10	Figulla® Flex II ASD	Size 10.5	9<D≤10.5
29ASD12	Figulla® Flex II ASD	Size 12	10.5<D≤12
29ASD13*	Figulla® Flex II ASD	Size 13.5	12<D≤13.5
29ASD15	Figulla® Flex II ASD	Size 15	12<D≤15
29ASD16*	Figulla® Flex II ASD	Size 16.5	15<D≤16.5
29ASD18	Figulla® Flex II ASD	Size 18	15<D≤18
29ASD21	Figulla® Flex II ASD	Size 21	18<D≤21
29ASD24	Figulla® Flex II ASD	Size 24	21<D≤24
29ASD27	Figulla® Flex II ASD	Size 27	24<D≤27
29ASD30	Figulla® Flex II ASD	Size 30	27<D≤30
29ASD33	Figulla® Flex II ASD	Size 33	30<D≤33
29ASD36	Figulla® Flex II ASD	Size 36	33<D≤36
29ASD39	Figulla® Flex II ASD	Size 39	36<D≤39
29ASD40	Figulla® Flex II ASD	Size 40	39<D≤40

Универсальный окклюдер Figulla® Flex II Uniform


Номер по каталогу	Наименование продукта	Диск Ø (мм)	Размер дефекта (мм)
16UNI17	Figulla® Flex II UNI	17/17	D≤8.4
16UNI24	Figulla® Flex II UNI	24/24	D≤11.9
16UNI28	Figulla® Flex II UNI	28.5/28.5	D≤13.9
16UNI33	Figulla® Flex II UNI	33/33	D≤16.4
16UNI40*	Figulla® Flex II UNI	40/40	D≤19.5

* При условии наличия


Совершенствою Характеристики



Figulla® Flex II Окклюдер ДМПП и ООО третьего поколения

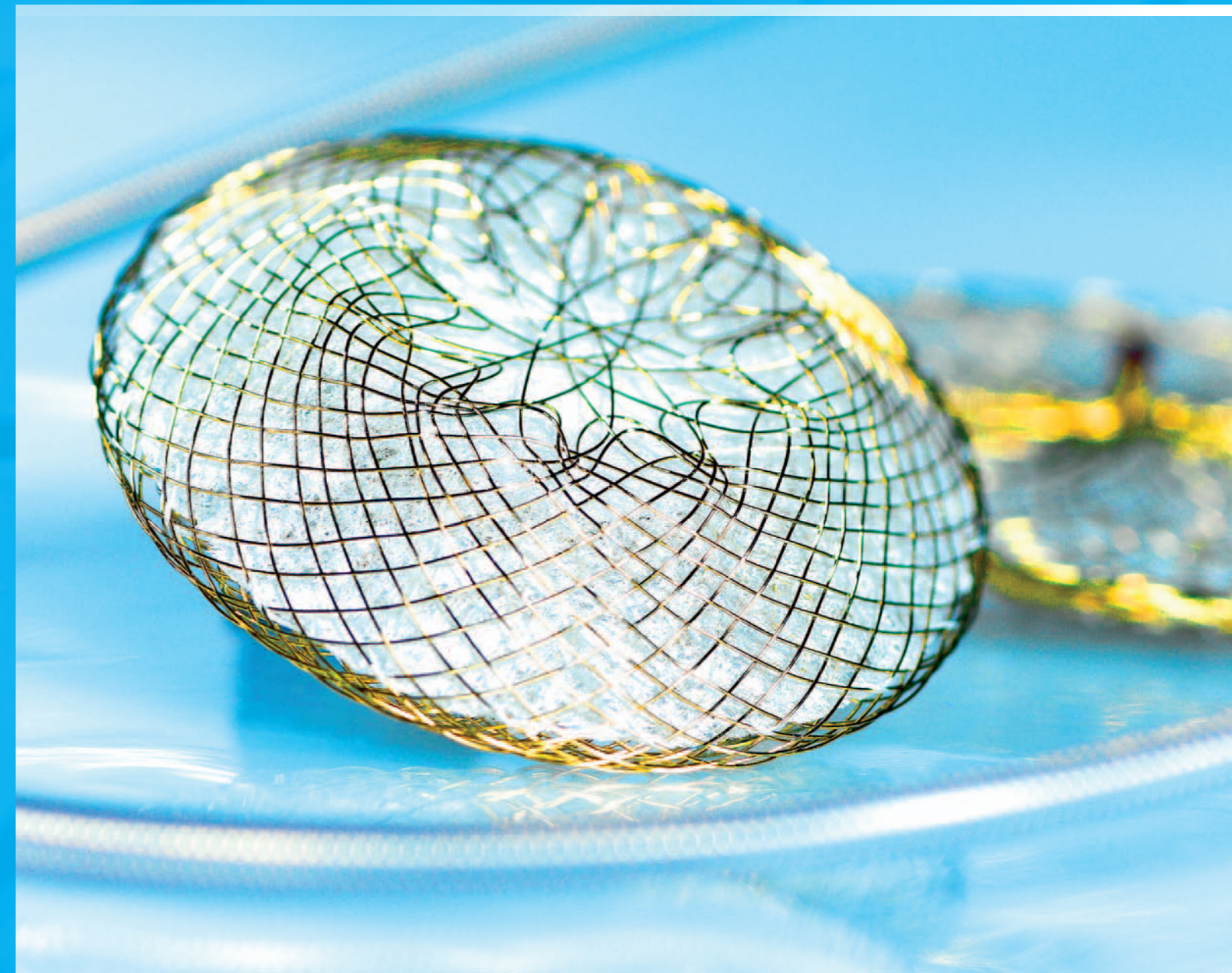

Figulla® Flex II Оклюдер ДМПП и ООО третьего поколения

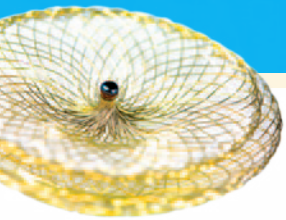

История инноваций, характеристик и безопасности

С момента разработки первого уникального окклюдера Occlutech в 2003 году, более 20,000 окклюдеров ДМПП и ООО были доставлены в 50 стран по всему миру. История характеристик и безопасности Occlutech является идеальной, однако мы всегда стремимся к инновациям и улучшению существующих продуктов. Применение технологии особой гибкости позволяет нашим продуктам удовлетворять широкому спектру геометрических задач. Flex II является окклюдером третьего поколения. Его производство только началось, но уже понятно, что он является одним из лучших решений, доступных на рынке

Новые уникальные характеристики

Линейка окклюдеров Flex II разработана в соответствии с курсом Occlutech на постоянные инновации и усовершенствования:

- Новое плетение минимизирует массу материала в левопредсердном диске
- Улучшена совместимость с катетером для доставки
- Новый гибкий кончик системы доставки позволяет предварительно задать конфигурацию в сложных случаях
- Гибкая система доставки позволяет произвести имплантацию «в точку»,




Гибкий кончик

Кроме оптимальной ангуляции между системой доставки и окклюдером, кончику системы доставки может быть придана форма для достижения оптимального угла, необходимого для имплантации. Технология "Kinza", специально разработанная Occlutech's,

Передовой дизайн

В новом окклюдере Figulla Flex II применяется уникальный дизайн и технология плетения окклюдера Occlutech, предусматривающая различное плетение в различных его частях. Плетение дистального диска отличается от плетения проксимального, что придаёт устройству более низкий профиль

Уникальное плетение Flex II минимизирует массу материала в составе дистального диска, что позволяет уменьшить профиль всей системы

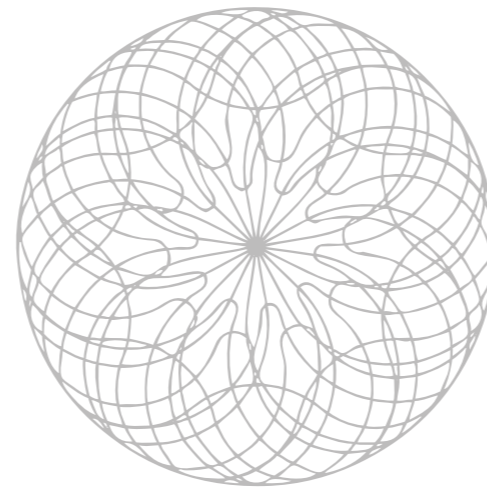


50° Система доставки

Система доставки для продуктов линейки Figulla Flex II подверглась дальнейшим улучшениям. Теперь окклюдеру может придаваться ангуляция вплоть до 50 градусов без значительного подтягивания окклюдера. Это важно при сложном позиционировании, особенно при закрытии дефектов с менее выраженными краями и в ситуации, когда угол желаемого позиционирования отличается от угла позиционирования системы доставки

Совершенствуя Характеристики

Уменьшая диаметр системы доставки

Уникальная технология плетения Occlutech позволила производителю уменьшить профиль системы доставки на 1-3 F. Это выражается в уменьшении профиля системы доставки на 20%, что особенно важно при применении у маленьких детей.

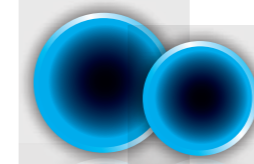

Плетение Flex II позволяет уменьшить диаметр катетера для доставки, в среднем, на 20%

Передовая технология обработки поверхности

Технология обработки поверхности Occlutech была разработана с целью достижения максимальной биологической совместимости имплантата. Особый процесс окисления, в рамках которого происходит покрытие поверхности оксидом титана, придаёт окклюдерам Occlutech их характерный золотистый цвет.

Слой оксида титана придаёт имплантатам их характерный золотистый цвет.

Система доставки позволяет задать наклон до 50°, что позволяет добиться идеального позиционирования ещё до раскрытия окклюдера.

Европейское качество

Occlutech соблюдают высочайшие стандарты качества. Качество для нас превыше всего. Наша преданность пациентам и медицинскому сообществу является основной движущей силой.

Мы стремимся быть в авангарде технологий и продуктов, это делает нас отличными от других, а наши клиенты получают передовые решения для лечения структурных заболеваний сердца.



До раскрытия окклюдера дистальный кончик Occlutech принимает округлую форму, сводя на нет риск повреждений.

Мягкий атравматичный кончик

Уникальный мягкий атравматичный кончик окклюдера позволяет производить имплантацию в самых сложных условиях. Уникальная технология плетения Occlutech позволяет производить окклюдеры без дистального зажима, минимизируя риск образования тромбов и повреждения дистальной стенки левого предсердия.