

Edwards NovaFlex+

Чрезбедренная система доставки
для аортального клапана Edwards SAPIEN XT

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Колесо точной настройки с большей на 20% длиной окружности, обеспечивает более точное и плавное выравнивание клапана.



Стилет длиной 38 см избавляет от необходимости дополнительной подготовки перед использованием




Индикатор зоны кримпирования клапана облегчает подготовку системы к имплантации



Индикатор объема теперь расположен на захвате устройства

РНаименование продукта	23 mm	26 mm
NovaFlex+ Чрезбедренный набор	9355NF23	9355NF26
Edwards SAPIEN XT Транскатетерный аортальный клапан	9300TFX	9300TFX
NovaFlex+ Система доставки	9355FS23	9355FS26
Edwards Интродьюсер в наборе	916ES23	918ES26
RetroFlex Dilator Kit	9100DKS	9100DKS
Edwards 4 см Чрезбедренный баллонный катетер	9350BC20	9350BC23
Кримпер	9350CR	9350CR
Atrion QL2530 Шприц-манометр	96402	96402

*Includes the Qualcrimp Crimping Accessory, 9300QC and 2-piece Crimper Stop

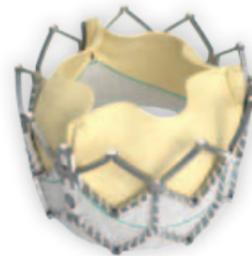

Edwards SAPIEN XT
Transcatheter Heart Valve

Edwards NovaFlex+

Чрезбедренная система доставки
для аортального клапана Edwards Sapien XT



Raymed Trading Group
www.raymed.ru

Представительство Акционерной компании «Эдвардз Лайфсајенсиз АГ» (Швейцария)
123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, офис 1327

www.edwards.com

Официальный дистрибьютер в России компания ООО «Раймед ТГ ПБТ»
129626, Россия, Москва, Графский переулок, д.12А, строение 2, офис 103, 110, 201

www.raymed.ru



Edwards




Edwards

Edwards NovaFlex+ Чрезбедренная система доставки


Обновленная и удобная в работе чрезбедренная система доставки NovaFlex+ разработана для максимально точной имплантации клапана.

360°

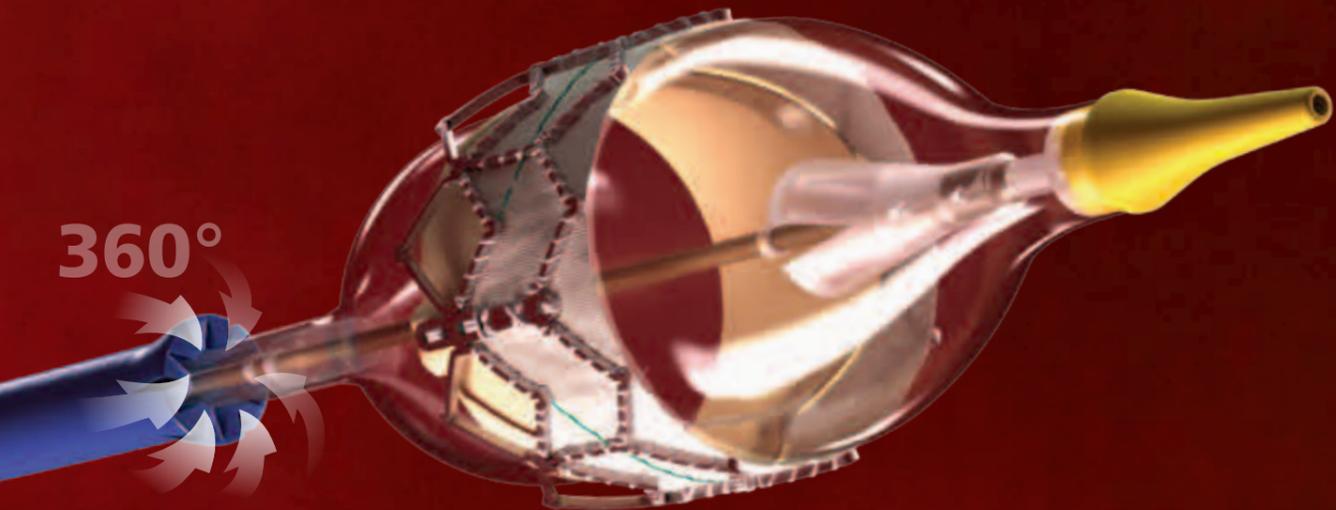

ОБНОВЛЕННЫЙ КОНЧИК 360° FLEX TIP ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ВО ВРЕМЯ ИМПЛАНТАЦИИ КЛАПАНА

Синие гибкие катетеры NovaFlex и NovaFlex+ системы доставки разработаны для стабилизации всей системы при имплантации клапана. Гибкий дизайн 360° FLEX TIP кончика системы NovaFlex+, оказывает более мощную поддержку баллона для максимально точной имплантации аортального клапана Edwards SAPIEN XT, а также облегчает его выравнивание.

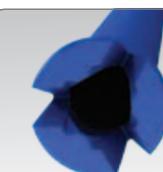

Edwards NovaFlex Flex Tip



Edwards NovaFlex+ 360° Flex Tip


Edwards NovaFlex System

Edwards NovaFlex+ System

УМЕНЬШЕННЫЙ КОНЧИК БАЛЛОНА

Кончик баллона NovaFlex+ уменьшен на 3 мм.

Баллон уникальной формы и обновленный кончик сглаживает и облегчает проведение клапана.

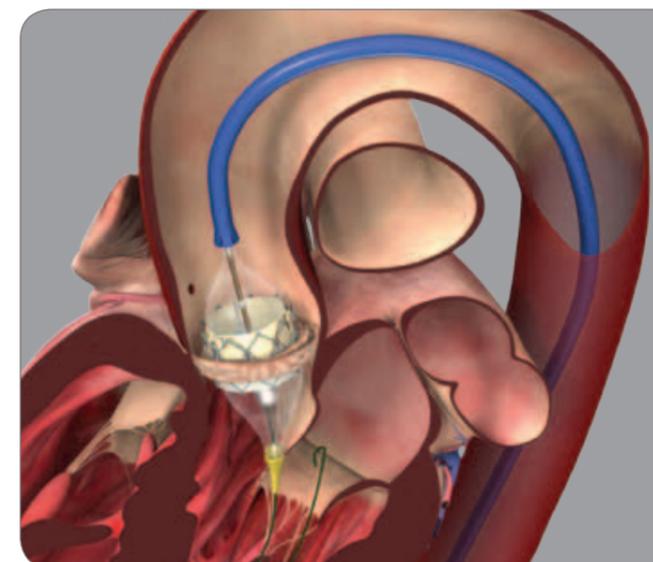

СИСТЕМА ДЛЯ ЧРЕЗБЕДРЕННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ КЛАПАНА

Чрезбедренная система NovaFlex+ объединяет в себе: обновленный баллон и новый Edwards eSheath интродьюсер с уникально тонким профилем (16F/18F), динамическим механизмом расширения для уменьшения травм сосудов доступа.



Edwards 4 см чрезбедренный баллон катетер



Edwards eSheath Расширяемый Интродьюсер