



Vascular[®]
therapies for living

xperience

Коронарный баллонный
катетер

THE CORONARY SOLUTION

Превосходная доставляемость

Идеальный баланс между прочностью и гибкостью для пересечения наиболее труднопроходимых поражений в извитой анатомии сосудов.

Точный дистальный контроль благодаря плавной подаче, оптимизирующей способность к проталкиванию с отличной дистальной гибкостью.

ОТКРЫТЬ

ПРОЙТИ

ДОСТИЧЬ

HYDRAX


Гидрофильное прочное покрытие

HYDRAX, запатентованное гидрофильное покрытие, специально разработанное для ПТА баллона. Гарантированная стабильная работа и контроль в течение всей процедуры.



Превосходные характеристики для прохождения поражений

Профиль кончика

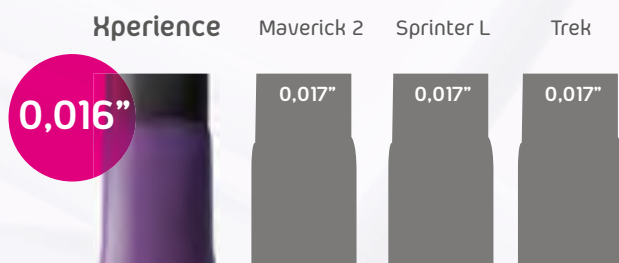

Тест выполнен iVascular. Данные находятся в отчете iVascular.

Входной профиль

УСТРОЙСТВО	КОНЧИК
xperience	0,026"
Maverick 2	0,028"
Sprinter L	0,029"
Trek	0,028"

Данные представлены для РТА баллонного катетера диаметром 2,0 мм.
Тест выполнен iVascular. Данные находятся в отчете iVascular.

Вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры

Больше гибкости при одинаковой визуализации.



Возможность открывать наиболее сложные поражения


6 F совместимость с ангиопластикой с помощью двухбаллонного катетера

Низкий профиль прохождения между проксимальной и дистальной частями катетера гарантирует совместимость с ангиопластикой с помощью двухбаллонного катетера



Общие характеристики

- Катетер быстрой замены (RX)
- Рабочая длина катетера: 142 см
- Совместимость с проводником: макс. 0,014"
- Номинальное давление: 6 атм
- Расчётное давление разрыва (RBP): 16 атм
- Срок годности: 3 года
- Брахиальные и феморальные маркеры на проксимальной части

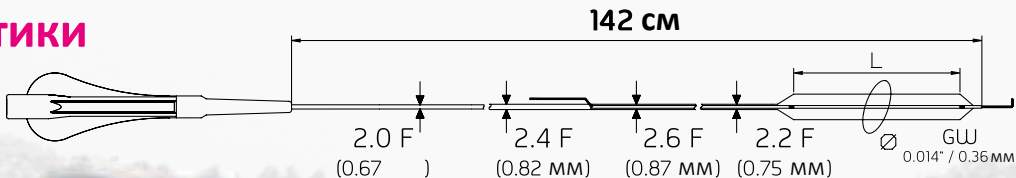

CE Mark сертифицированный продукт

Значения Диаметр баллона (мм)	Рабочая длина катетера 142 см					
	Длина баллона (мм)					
	10	15	20	25	30	40
1.50	BC PR14 150 150 010	BC PR14 150 150 015	BC PR14 150 150 020		BC PR14 150 150 030	
2.00	BC PR14 150 200 010	BC PR14 150 200 015	BC PR14 150 200 020	BC PR14 150 200 025	BC PR14 150 200 030	BC PR14 150 200 040
2.50	BC PR14 150 250 010	BC PR14 150 250 015	BC PR14 150 250 020	BC PR14 150 250 025	BC PR14 150 250 030	BC PR14 150 250 040
3.00	BC PR14 150 300 010	BC PR14 150 300 015	BC PR14 150 300 020	BC PR14 150 300 025	BC PR14 150 300 030	BC PR14 150 300 040
3.50	BC PR14 150 350 010	BC PR14 150 350 015	BC PR14 150 350 020	BC PR14 150 350 025	BC PR14 150 350 030	BC PR14 150 350 040
4.00	BC PR14 150 400 010	BC PR14 150 400 015	BC PR14 150 400 020	BC PR14 150 400 025	BC PR14 150 400 030	BC PR14 150 400 040
4.50	BC PR14 150 450 010	BC PR14 150 450 015	BC PR14 150 450 020	BC PR14 150 450 025	BC PR14 150 450 030	BC PR14 150 450 040

Vascular[®]
therapies for living

Эксклюзивный Дистрибьютор

ООО «РАЙМЕД ТГ ПВТ»

141001, Московская область,
Мытищинский район,
г. Мытищи,
ул. 1-я Вокзальная, д.8
(495) 956-83-16
www.raymed.ru

 **Raymed Trading Group**

Производитель:
LVD Biotech, S.L.

Cami de Can Ubach, 11
08620 Sant Vicenç dels Horts
Barcelona- Spain
Тел.: +34 936 724 711

www.ivascular.es
info@ivascular.es